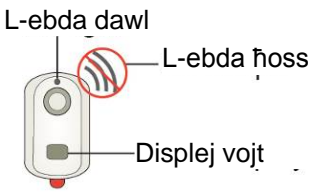
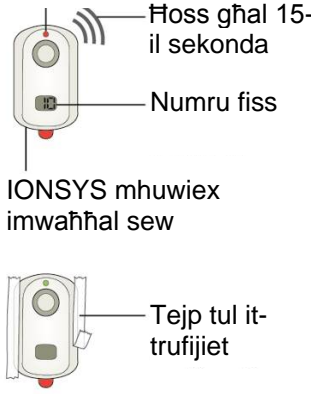
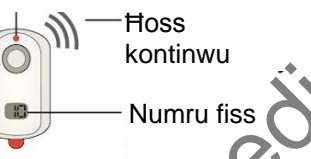
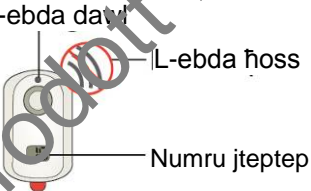


Problemi li jista' jkolluk b'IONSYS

Kull IONSYS huwa ddisinjat biex jaghti sa 80 doza ta' 10 minuti ta' fentanyl fuq perjodu ta' 24 siegħa. It-tabella ta' hawn taht tirrappreżenta l-messaġġi ta' żball differenti li jistgħu jseħħu, flimkien mal-kawża probabbli u l-azzjoni li għandha tittiehed.

Messaġġ ta' żball/rispons	Kawża probabbli	Azzjoni meħtieġa
 <p>L-ebda daw! L-ebda ħoss Displej vojjt</p>	Batterija baxxa jew sistema difettuża	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tużax is-sistema. 2. Armi s-sistema skont il-Ħames Pass - Tneħħija u Rimi ta' IONSYS. 3. Wahhal sistema ġdida fuq sit tal-ġilda ġdid.
 <p>Aħmar iteptep għal 15-il sekonda Ħoss għal 15-il sekonda Numru fiss IONSYS mhux iev imwahhal sew Tejp tul it-trufijiet</p>	Kuntatt hazin mal-ġilda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jekk IONSYS jidher li huwa maħlul jew li qed jinqala' mill-ġilda, wahħlu mal-ġilda tal-pazjent billi tagħfas it-truf bis-saħħa jew billi tapplika tejp mhux allergeniku. 2. Jekk qed tuza t-tejp, applikah tul it-truf tas-sistema IONSYS, tghattix il-buttuna tad-dożaġġ jew id-displej. 3. Jekk is-sistema terġa' ddoqq, neħhi u armi s-sistema, u wahhal sistema ġdida fuq sit tal-ġilda differenti.
 <p>Aħmar iteptep Ħoss kontinwu Numru fiss</p>	Żball tas-sistema	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neħhi s-sistema mill-pazjent. 2. Żomm il-buttuna tad-dożaġġ sakemm il-ħoss jieqaf u ma jidher xejn fuq id-displej. 3. Armi s-sistema skont il-Ħames Pass - Tneħħija u Rimi ta' IONSYS. 4. Wahhal sistema ġdida fuq sit tal-ġilda ġdid.
 <p>L-ebda daw! L-ebda ħoss Numru jteptep</p>	Tmiem ta' użu wara 24 siegħa jew 80 doza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neħhi s-sistema mill-pazjent. 2. Żomm il-buttuna tad-dożaġġ 'l isfel sakemm ma jidher xejn fuq id-displej. 3. Armi s-sistema skont il-Ħames Pass - Tneħħija u Rimi ta' IONSYS. 4. Wahhal sistema ġdida fuq sit tal-ġilda ġdid.

Jekk tkun suspettata hsara jew funzjoni hazina fl-apparat minn professjonista fil-kura tas-saħħa, IONSYS għandu jitneħħa mill-pazjenti u The Medicines Company tiġi kkuntattjata minnufih. Il-professjonista fil-kura tas-saħħa għandu jiżgura li l-pazjent jifhem li jekk jissuspetta hsara jew funzjoni hazina fl-apparat, dan għandu jinforma lil professjonista fil-kura tas-saħħa immedjatament.