




























































## STRUZZJONIJIET GHALL-UŻU

### Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet


#### 1/ NEHHI L-GHATU TAL-LABRA

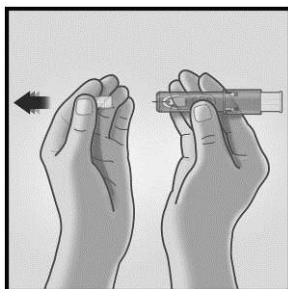

Nehhi l-ghatu tal-labra mis-Sistema ta' Mikro-Injezzjoni.

**Tnehix l-arja minn ġol-labra.**


#### 2/ ŻOMM IS-SISTEMA TA' MIKRO-INJEZZJONI BEJN IS-SABA' L-KBIR U DAK TAN-NOFS

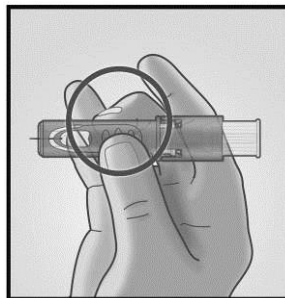

Żomm is-sistema billi tpoġġi s-saba' l-kbir u s-saba' tan-nofs biss fuq il-pads tas-subġhajj, is-saba' l-werrej jib' ta' ħieles.


**Tpoġġix subġhajk fuq it-twiegi.**

#### 3/ DAHĦAL IL-LABRA MALAJR B'MOD PERPENDIKULARI MAL-ĠILDA

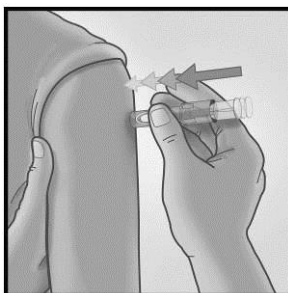

Daħhal il-labra b'mod perpendikulari mal-ġilda, fiż-żona tad-deltoidje, b'moviment qasir u mgħaġġel.

#### 4/ INJETTA BILLI TUŻA S-SABA' L-WERREJ

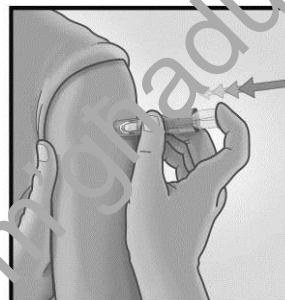

Ġaladarba l-labra mikro tkun iddahħlet, applica pressjoni hafifa fuq wiċċ il-ġilda u injetta billi tuża s-saba' l-werrej biex tagħfas fuq il-planġer.

It-test tal-vina mhuwiex meħtieġ.

#### 5/ ATTIVA L-PROTEZZJONI TAL-LABRA BILLI TIMBOTTA BIS-SAĦHA FUQ IL-PLANĠER



Nehhi l-labra minn fuq il-ġilda.

Dawwar il-labra lil hinn minnek u minn persuni oħrajn.

Bl-istess id, aghfas bis-saħha hafna bis-saba' l-kbir fuq il-planġer biex tattiva l-protezzjoni tal-labra.

Sen tasma' klikk u l-protezzjoni toħroġ biex tiks l-labra.

Armi immedjatament is-sistema fl-eqreb kontenitur għal oġġetti bil-ponta jew li jaqtgħu.

L-injezzjoni tkun ikkunsidrata li rnexxiet kemm jekk tkun osservata l-preżenza ta' ħakk sever kif ukoll jekk le.

F'każ tal-preżenza ta' likwidu fis-sit tal-injezzjoni wara l-ġhoti tat-tilqima, tilqim mill-ġdid mhuwiex meħtieġ.

Arja wkoll is-sezzjoni 3. KIF GĦANDEK TUŻA INTANZA