


NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím si prosím prečítajte návod


1/ ODSTRÁŇTE VRCHNÁK IHLY

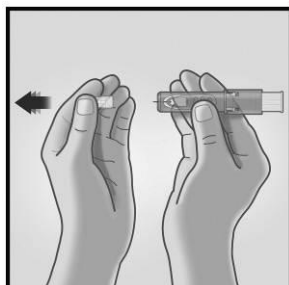

Zložte vrchnák ihly z mikroinjekčného systému.

Nevytlačajte vzduch cez ihlu.


2/ MIKROINJEKČNÝ SYSTÉM DRŽTE MEDZI PALCOM A PROSTREDNÍKOM

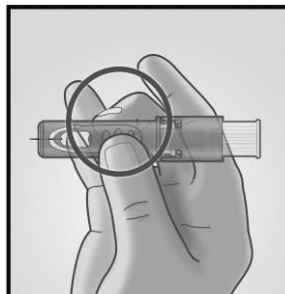

Systém držte umiestnením palca a prostredníka ľav. na podložke na prsty, ukazovák ost. ne voľný.


Nedávajte prsty na okienka.

3/ IHLU RÝCHLO ZASUŇTE KOLMO DO KOŽE

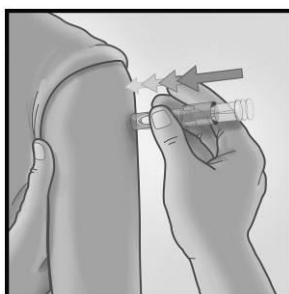

Ihlu zasunúť kolmo do kože v oblasti deltového svalu krátkym, rýchlym pohybom.

4/ APLIKUJTE POMOCOU UKAZOVÁKA

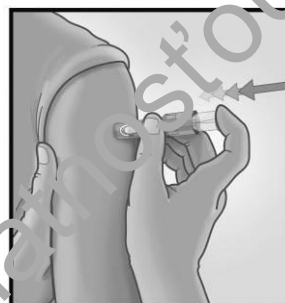

Keď je mikroihla zasunutá, udržiavajte ľahký tlak na povrch kože a aplikujte pomocou ukazováka, ktorým tlačíte piest.

Test ciev nie je potrebný.

5/ KRYT IHLY AKTIVUJTE PEVNÝM STLAČENÍM PIESTU



Ihlu vytiahnite z kože.

Ihlu nasmerujte smerom preč od seba aj od druhých.

Tou istou rukou veľmi pevne stlačte palcom piest, čím aktivujete kryt ihly. Budete počuť cvaknutie a vystrčí sa kryt, ktorý zakryje ihlu.

Systém okamžite zlikvidujte do najbližšej nádoby na ostrý odpad.

Injekcia sa považuje za úspešnú nezávisle na tom, či pozorujete prítomnosť pupeňa.

V prípade prítomnosti tekutiny v mieste vpichu po podaní očkovacej látky sa opakované očkovanie nevyžaduje.

Pozri tiež časť 3. AKO POUŽÍVAŤ INTANZU